

MA 1

Appareil de dépistage des troubles auditifs

Petit et facilement maniable

Avec son design ultra léger, le MA 1 tient facilement dans votre main. MA 1 est notre appareil le plus léger et plus pratique des appareils de mesure de l'audition en conduction aérienne. Les fréquences et les intensités peuvent être présentées d'une seule main.

Idéal pour le dépistage rapide

L'appareil est capable de délivrer un signal de tonalité pure à une oreille à la fois. La gamme de stimulus est de 15 à 50 dB HL par paliers de 5 dB. Les fréquences de test vont de 500 à 4 000 Hz. L'appareil est équipé d'un casque CA DD45.

Si le MA 1 est utilisé dans un environnement bruyant, nous vous recommandons de choisir le casque anti-bruit CA DD65 v2 en option.

Autonomie de batterie allongée

Le MA 1 est alimenté par deux piles standard AA. L'unité s'éteint d'elle-même lorsqu'elle reste inactive, et s'allume de nouveau par simple pression d'un bouton.

Bref aperçu des caractéristiques

- Appareil portable pour tests par conduction aérienne
- Utilisation facile d'une seule main
- Poids exceptionnellement léger
- Fréquences de test : 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz
- Signal son pur de 15 dB HL à 50 dB HL
- Fonctionne avec des piles (2 piles AA)
- Arrêt automatique
- Casque CA DD45
- Casque CA DD65 v2 à réduction de bruit en option



Données techniques


SPECIFICATIONS DU MA 1

| | |
|-------------------------------|--|
| Signaux de test | Son pur (continu) |
| Fréquences de test | 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz |
| Plage de niveau d'audition CA | de 15 dB HL à 50 dB HL |
| Pas du niveau | 5 dB |
| Précision | ± 4 dB |
| Distorsion | inférieure à 3 % |

APPAREIL GENERALITES

| | |
|---------------------|--|
| Dimensions | L x P x H : 6,4 cm x 15 cm x 2,3 cm |
| Poids | 115 g (appareil et piles uniquement) |
| Alimentation | 2 piles AA arrêt automatique |
| Autonomie des piles | 6 mois, selon la vitesse de déchargement des piles |

NORMES

| | |
|------------|---|
| Sécurité | IEC 60601-1: 2012 Parties appliquées de catégorie type B |
| CEM | IEC 60601-1-2:2014 |
| CE0123 |  Classe IIa conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux Le MA 1 n'est pas classifié selon la norme EN 60645-1 et n'est pas en conformité avec cette norme. |
| Audiomètre | |

COMPOSANTS STANDARD

- Casque CA DD45
- Support d'appareil
- 2 piles AA

TRANSDUCTEUR EN OPTION


- Casque CA DD65 v2 à réduction de bruit

Les spécifications sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

Composants standards



Appareil portable
MA 1

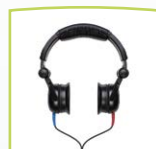

Casque CA
DD45

Transducteur en option



Casque CA
DD65 v2



MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin · Allemagne
Tel.: +49 30/70 71 46-50 · Fax: +49 30/70 71 46-99
sales@maico.biz · www.maico.biz